

SKY fast & fixed Provisorium




Temporäre festsitzende Versorgung mit
novo.lign Verblendschalen & top.lign professional


Quick Guide

bredent

Temporäre festsitzende Versorgung mit novo.lign Verblendschalen & top.lign professional

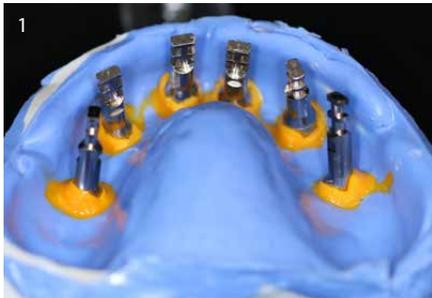

1
Reponierung der Abformkappen inkl. Laboranaloge.

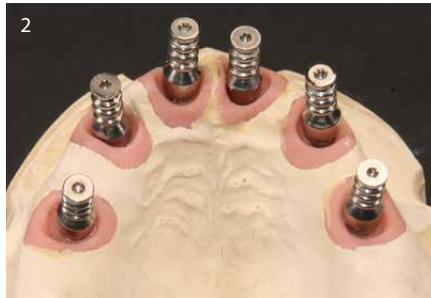

2
Modellherstellung mit Zahnfleischmaske (Multisil-Mask weich) und Superhartgips der Klasse 4 (Exakto-Rock S).



3
Einartikulieren mittels Quetschbiss.



4
Aufschrauben der Prothetikkappen, ggf. ist ein Kürzen der Prothetikkappen notwendig; Wachsaufstellung mit novo.lign Verblendschalen und Aufstellwachs; Anschließend Erstellung des Vorwalls mit haptosil D & visio.sil fix.



5
novo.lign Verblendschalen vorbereiten:
- Abstrahlen mit Aluminiumoxyd (110µm, 2-3 bar)
- Strahlstaub mit ölfreier Pressluft entfernen – nicht Dampfstrahlen! Evtl. schwer zugängliche Bereiche mit top.lign professional liquid benetzen. Kein chem. Bonding notwendig!




6
Silikonschläuche auf die Prothetikkappen setzen, als Platzhalter für den späteren Klebespalt.



7
Eine Prothetikkappe in die Prothese einarbeiten. Bei dieser den Schraubenkanal mit SKY Verschlusspin verschließen.



8
Gipsmodell mit Isoplast dünn bestreichen -> Pfützenbildung vermeiden. Vorwall mit den Verblendschalen auf Modell aufsetzen.

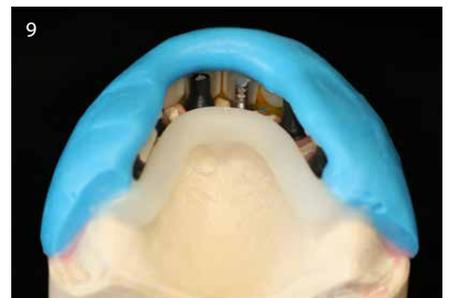

9
Lingualen Bereich mit Wachsstreifen ausblocken, um ein Wegfließen des Kunststoffes zu verhindern.



10 top.lign professional mit einem Mischungsverhältnis von 10g zu 7ml gleichmäßig anmischen und 30 Sek. quellen lassen.



11 top.lign professional in den Vorwall eingießen. Die Verarbeitungsbreite beträgt 3-5 Minuten.




12 Die richtige Positionierung erfolgt mit dem Posi-boy.



13 Drucktopf, 3-4 bar, ca. 50°C, 10 Minuten.



14 Bearbeitung mit den Fräsern und leichte Vorpolitur. Die basale Gestaltung sollte so erfolgen, dass keine Speisereste haften bleiben.

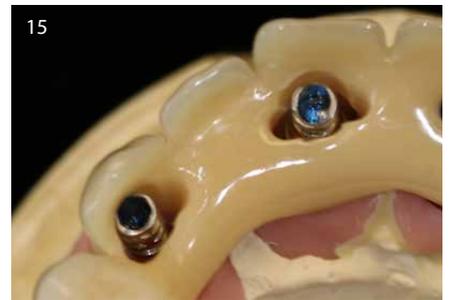

15 Platz für die Prothetikappen schaffen und kleine Kerben anbringen - zum einfachen Einbringen des Qu-resins im Mund.



16 Vorbereitung mit Qu-Connector.



17 Spannungsfreies Verkleben im Mund mit Qu-resin dentin, Bisskontrolle nach dem Festkleben (ansonsten Gefahr des Bruchs).



18 Überschüsse von Qu-resin dentin entfernen und ausarbeiten. Politur mit Ziegenhaarbürste und Baumwollschwabbel Evtl. Nachpolitur mit Handstück und Acrypol. Vor allem basale Anteile gut auspolieren.




Fertiggestelltes Provisorium, anschließend erfolgt die finale Eingliederung im Patientenmund.



Die verwendeten Produkte

Artikel	REF	Verpackungseinheit
top.lign professional Polymer	Abhängig von Farbe und Verpackungsgröße	22 Farben 40 g, 80 g, 200 g
top.lign professional liquid	Proliq01 Proliq05	100 ml 500 ml
novo.lign Verblendschalen	Abhängig von Farbe und Form	17 Farben 15 Front- und 3 Seitenzahnformen
haptosil D	54001180 54001190	2x 1300 g 2x 7500 g
visio.sil fix	54001300	50 ml Doppelkartusche
Aufstellwachs 3 rosa	43001510	220 g
Posi-boy	36001010	1 Stück
Bur	Siehe Prospekt 0007530D	1 Stück
Acrypol Polierpaste	52000170	170 g
Ziegenhaarbürste	35000550 35000540	je 15 Stück
Baumwollschwabbel	35000650	15 Stück
Multisil-Mask gingival mask, soft	54001047	50 ml Doppellartusche
Exakto-Rock Scan Superhartgips, Klasse IV, für Scan Modelle	5700SE52 5700SE51 5700SE50	2 kg 5 x 2 kg 10 x 2 kg
Sortimen Qu-Connector und Qu-resin dentin	54001162	1 Stück

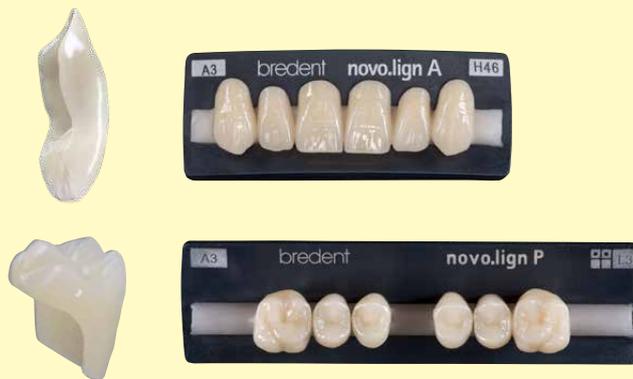

novo.lign Verblendschalen



Qu-resin dentin



top.lign professional

