

Die neue Referenz...



Bilder: ZT Antonio Lucetere, Savona, Italien

...zur effizienten Herstellung von Langzeitprovisoren und definitivem Zahnersatz in der Implantatprothetik

- provisorisch & definitiv
- bruchfest & physiologisch
- verfärbungssicher & plaqueresistent
- hervorragend polierbar & kantenstabil
- ästhetisch
- sicher & effizient

top.lign professional Polymer

Kompaktes System mit allen klassischen A-D Farben



Farbe Kappe	Material	Cervical 1	Cervical 2	Enamel 1	Enamel 2	Farben	40 g*	80 g	200 g
							REF	REF	REF
Black	Cervical 1					—	proCV101		
Black	Cervical 2					—	proCV201		
Blue	Enamel 1					—	proEN101	proEN108	proEN102
Blue	Enamel 2					—	proEN201	proEN208	proEN202
Blue	Transparent						proTran1		
Red	Bleach						proBL301		
Red	Dentin A1	✓					proDA101	proDA108	proDA102
Red	Dentin A2	✓					proDA201	proDA208	proDA202
Red	Dentin A3	✓					proDA301	proDA308	proDA302
Red	Dentin A3,5		✓				proDA351	proDA358	proDA352
Red	Dentin A4		✓				proDA401	proDA408	
Red	Dentin B1	✓					proDB101	proDB108	
Red	Dentin B2	✓					proDB201	proDB208	
Red	Dentin B3	✓					proDB301	proDB308	
Red	Dentin B4	✓					proDB401	proDB408	
Red	Dentin C1	✓	✓				proDC101	proDC108	
Red	Dentin C2		✓				proDC201	proDC208	
Red	Dentin C3		✓				proDC301	proDC308	
Red	Dentin C4		✓				proDC401	proDC408	
Red	Dentin D2	✓					proDD201	proDD208	
Red	Dentin D3	✓					proDD301	proDD308	
Red	Dentin D4	✓					proDD401	proDD408	

* auch im Set erhältlich

Wenn es schnell gehen muss...

Mischen Sie einfach 70% Dentin mit 30% Enamel und sparen Sie sich einen Arbeitsschritt.

top.lign professional Monomer



top.lign professional liquid
100 ml, REF proLiq01
500 ml, REF proLiq05


Tipp:

Verwenden Sie zur ästhetischen Individualisierung das Verblendkomposit **crea.lign**® in Kombination mit den **novo.lign**® Verblendschalen aus dem **visio.lign**® System.

Weitere interessante Angebote für Sie



REF 0095040D

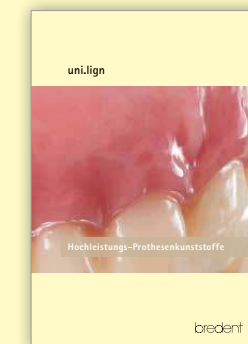

REF 0005950D

0005760D-20181024 Irrtum und Änderungen vorbehalten



top.lign professional



Zahnfarbendes Kaltpolymerisat für provisorische und definitive Versorgungen

Was zeichnet top.lign professional aus?

provisorisch & definitiv

- Für Provisorien und definitive Arbeiten zugelassen
- Zertifiziert als Medizinprodukt Klasse IIa

bruchfest & physiologisch

- Hervorragende mechanische Werte (Biegefestigkeit: ca. 100 Mpa, E-Modul: ca. 2600 Mpa) ermöglichen eine perfekte Verbindung zwischen notwendiger Stabilität einer Prothese und physiologischer Elastizität
- Doppelte Bruchfestigkeit bei Brückenversorgungen (gegenüber marktüblichen temporären Kunststoffen)
- Besonders für implantatprothetische Arbeiten geeignet

verfärbungssicher & plaqueresistent

- Die kompakte molekulare Struktur des Materials erlaubt eine Hochglanzpolierung und vermeidet Plaqueanlagerungen
- Durch Vollvernetzung des Materials reduzierte Wasseraufnahme, kein Vergilben und keine Verfärbungen

hervorragend polierbar & kantenstabil

- Sehr gute Poliereigenschaften ermöglichen eine besonders schnelle und einfache Verarbeitung
- Optimales Beschleifen dank hoher Kantenstabilität

ästhetisch

- Perfekte ästhetische Ausgestaltung durch das mehrschichtige Vollsortiment in den klassischen A-D Farben
- Durch die molekulare Struktur und die Verwendung von Lumineszenzfarbstoffen wirken selbst monolithisch hergestellte Arbeiten sehr natürlich
- Ästhetische Individualisierung mit dem Verblendkomposit crea.lign® möglich (aufeinander abgestimmtes Farbsystem)

sicher & effizient

- Blasenfreies Ausgießen
- Passgenaue Ergebnisse
- Spaltfreier Verbund zu Verblendschalen und Vollzähnen ohne zusätzliches chemisches Bonding



Indikationen

Provisorium & Interimszahnersatz

Sofortbelastungsbrücken auf Implantaten oder natürlichen Zähnen auch für Langzeitprovisorien (Tragedauer > 6 Monate)

- Festsitzend und bedingt herausnehmbar
- Mit und ohne Verblendschalen
- Mit und ohne Gerüstunterstützung

Implantatgetragene Sofortbelastungsbrücke



Sofortbelastungsbrücke, monolithisch aus top.lign professional

Bilder: ZTM Sebastian Schuldes, Eisenach, Deutschland



Ausgegossene Arbeit



Arbeit in situ

Provisorium auf natürlichen Zähnen



Brücke aus top.lign professional

Bilder: ZT Andrea Foschi, Ravenna, Italien



Ausgangssituation



Arbeit in situ

Definitivum

Implantatgetragener Zahnersatz

- Bedingt herausnehmbar und herausnehmbar (z.B. Stegarbeiten)
- Mit Verblendschalen, Vollzähnen oder crea.lign
- Mit Gerüstunterstützung

Teil- und Vollprothesen

- Teleskoparbeiten
- Klammermodellguss

Implantatgetragene definitive Arbeit



Brücke aus top.lign professional und ausgearbeiteter Gingiva, mit crea.lign individualisiert

Bilder: ZT Christian Dalla Libera, Padua, Italien




top.lign professional unbearbeitet



Arbeit in situ

Herausnehmbare Prothese

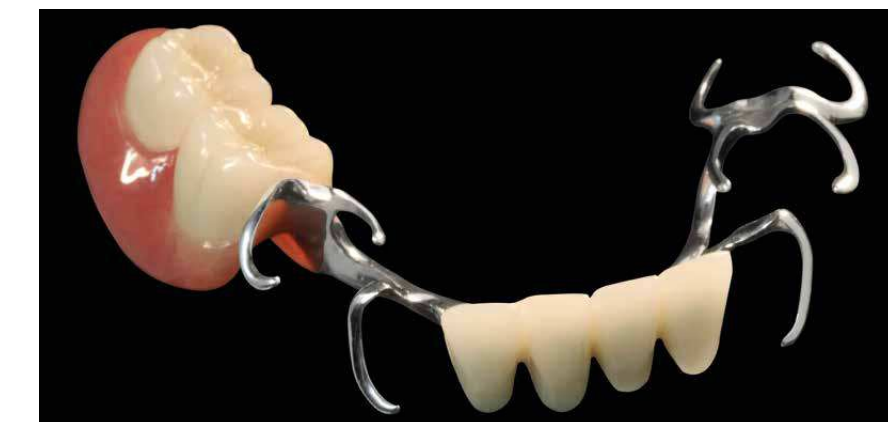

Klammerprothese aus top.lign professional und novo.lign Verblendschalen



Gießen von top.lign professional im Vorwall



Arbeit auf dem Modell