



crea.lign® Enamel	Teintes classiques A-D																
	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL3
E1																	
E2																	
E3																	
E4																	

La masse de personnalisation Transpa opal se laisse appliquer en complément à toutes les masses Dentine et Enamel

Opaqueurs crea.lign®									
Teintes du système	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teintes classiques A-D	A1 / B2	A2	A3	B1 / C1 / BL3	C2 / C3 / D2 / D4	B3 / B4	A3.5	A4 / C4	D3


En plus des opaueurs crea.lign® 1-9, un opaqueur crea.lign® GUM et un opaqueur crea.lign® Z sont disponibles.

L'opaqueur GUM est adapté à toutes les nuances de GUM. L'opaqueur Z est un opaqueur spécial pour toutes les infrastructures en oxyde de zirconie.

Sélection de pâtes

Tendance à la décoloration [ΔE]

Substances colorantes:
Immersion dans du café,
thé, tabac, vin rouge et
bleu de méthylène

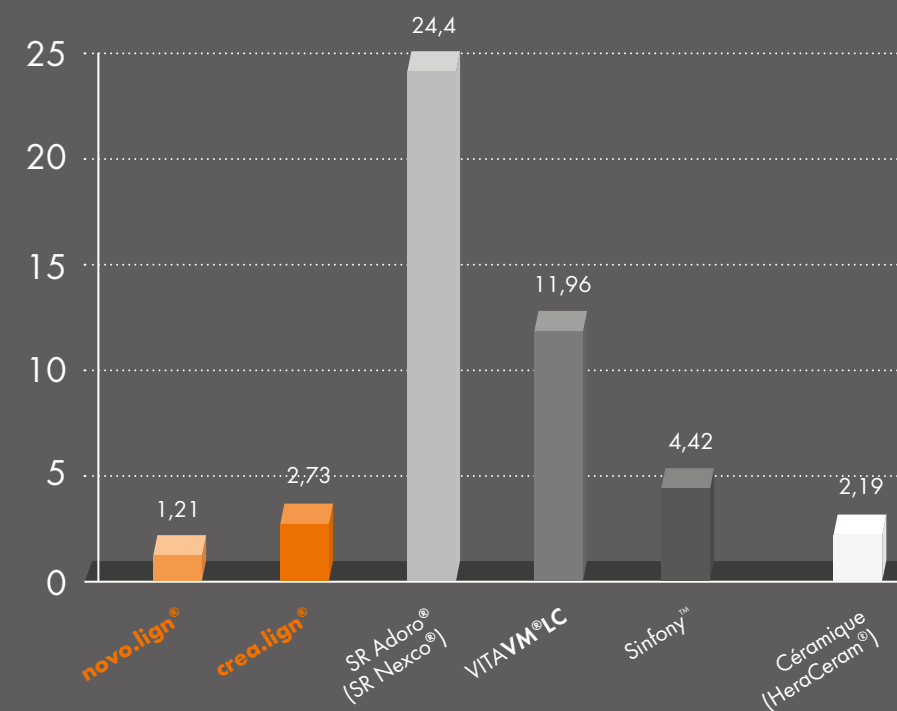

Graphique
„Tendance à la décoloration ΔE“
© Rapport de recherches du 07 mai 2012
de A. Rzanny et R. Göbel,
Clinique Universitaire de Lena, Allemagne

Toutes les désignations munies d'un ® ou ™ sont des
marques déposées ou protégées et/ ou des désignations
de sociétés ou de détenteurs de droits qui sont étrangers à
notre entreprise.

Pâte crea.lign®

Composite cosmétique



create natural beauty

bredent group

Coordonnées pour la France - bredent France:
T: +33 4 75 34 20 96 · F: +33 4 75 32 05 93
@: france@bredent.com

Coordonnées pour les autres pays francophones:
T: +49 7309 872-451 · F: +49 7309 872-444
@: info@bredent.com

0099070F-20190628
Sous réserve d'erreurs et de modifications



bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2
89250 Senden · Germany
www.visio-lign.com



create natural beauty

powered by
visio.lign®



SANS LIMITES

Toutes les pâtes crea.lign® sont compatibles avec les gels crea.lign® ainsi qu'avec les opaques et elles permettent une combinaison et mise en œuvre harmonieuse.

Stratifications crea.lign®


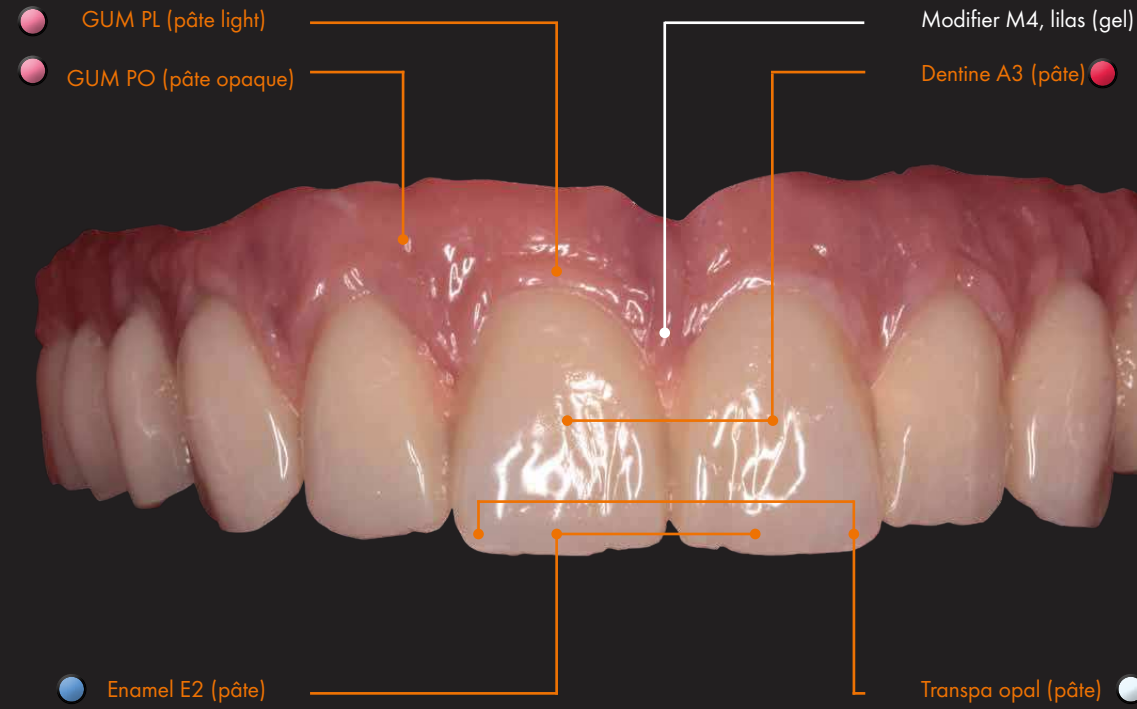


Photo : © 2018 by Andreas Lüdike, Bayreuth, Allemagne

Rugosité de surface après polissage [µm]

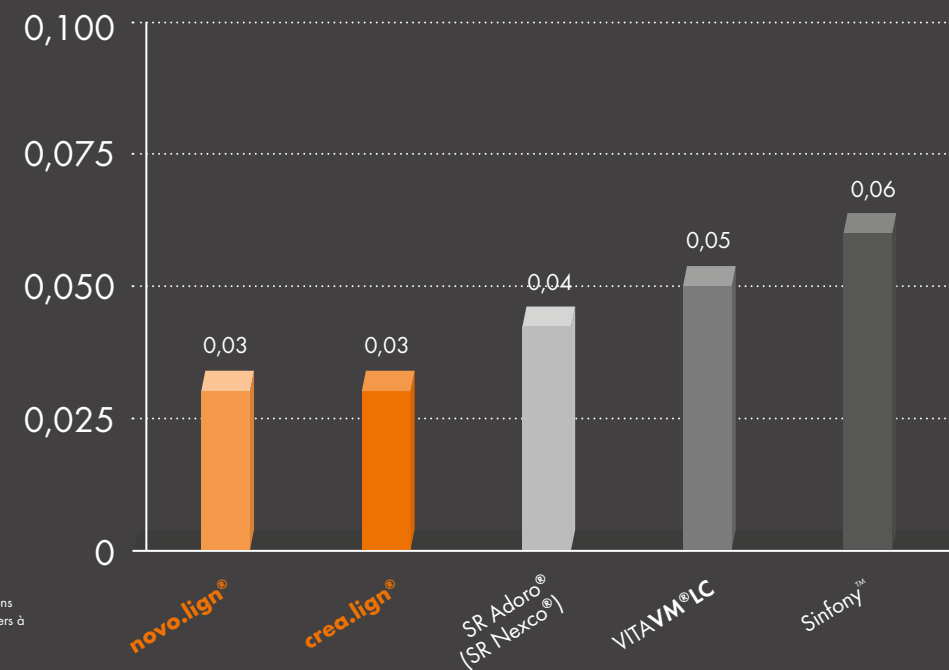

Graphique
„Rugosité de surface après polissage“
© Rapport de recherches du 07 mai 2012
de A. Rzanny et R. Göbel,
Clinique Universitaire de Iena, Allemagne

Toutes les désignations munies d'un ® ou ™ sont des marques déposées ou protégées et/ ou des désignations de sociétés ou de détenteurs de droits qui sont étrangers à notre entreprise.



PÂTES



Effet chromatique naturel


L'équilibre entre l'opalescence, la fluorescence et la translucidité assurent un effet chromatique naturel et vivant.

Le pouvoir couvrant et la translucidité sont contrôlés par l'épaisseur de couche. Le pouvoir couvrant croît avec l'épaisseur de couche. Pour le comportement de la translucidité c'est exactement l'opposé.

Les masses incisives crea.lign® sont parfaitement harmonisées aux masses dentine.

Facile à sculpter

La nouvelle consistance est plus molle et souple. Le façonnage est facile. Pas de collage indésirable, permet des transitions très fines dans le sculptage.

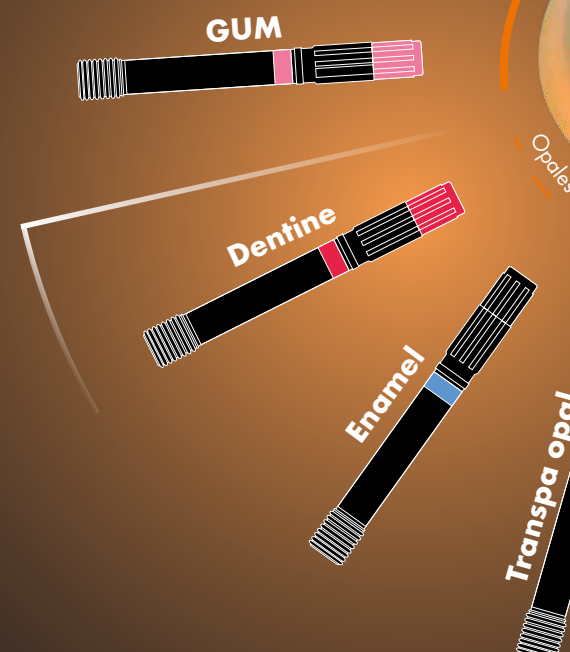

Pâtes crea.lign®

Opalescence

Translucidité

Valeurs de cohésion optimisées

La teneur en charges d'env. 60% réduit la rétraction à la polymérisation.

En raison de la composition, on obtient une excellente dureté en profondeur.

Les charges céramiques mises en œuvre augmentent la résistance à l'abrasion et empêchent l'apposition de plaque ainsi que les décolorations.

Par un simple polissage on obtient rapidement une brillance durable avec la pâte crea.lign®.

Application sûre et rapide



5 masses GUM

Nouvelles masses GUM



17 masses Dentine

Masses Dentine selon les teintes classiques A3, D et Bleach BI3



4 masses Enamel

Transpa opal