


Appareil de fraisage BF 2

Les glissières de précision garantissent la qualité du fraisage et du forage

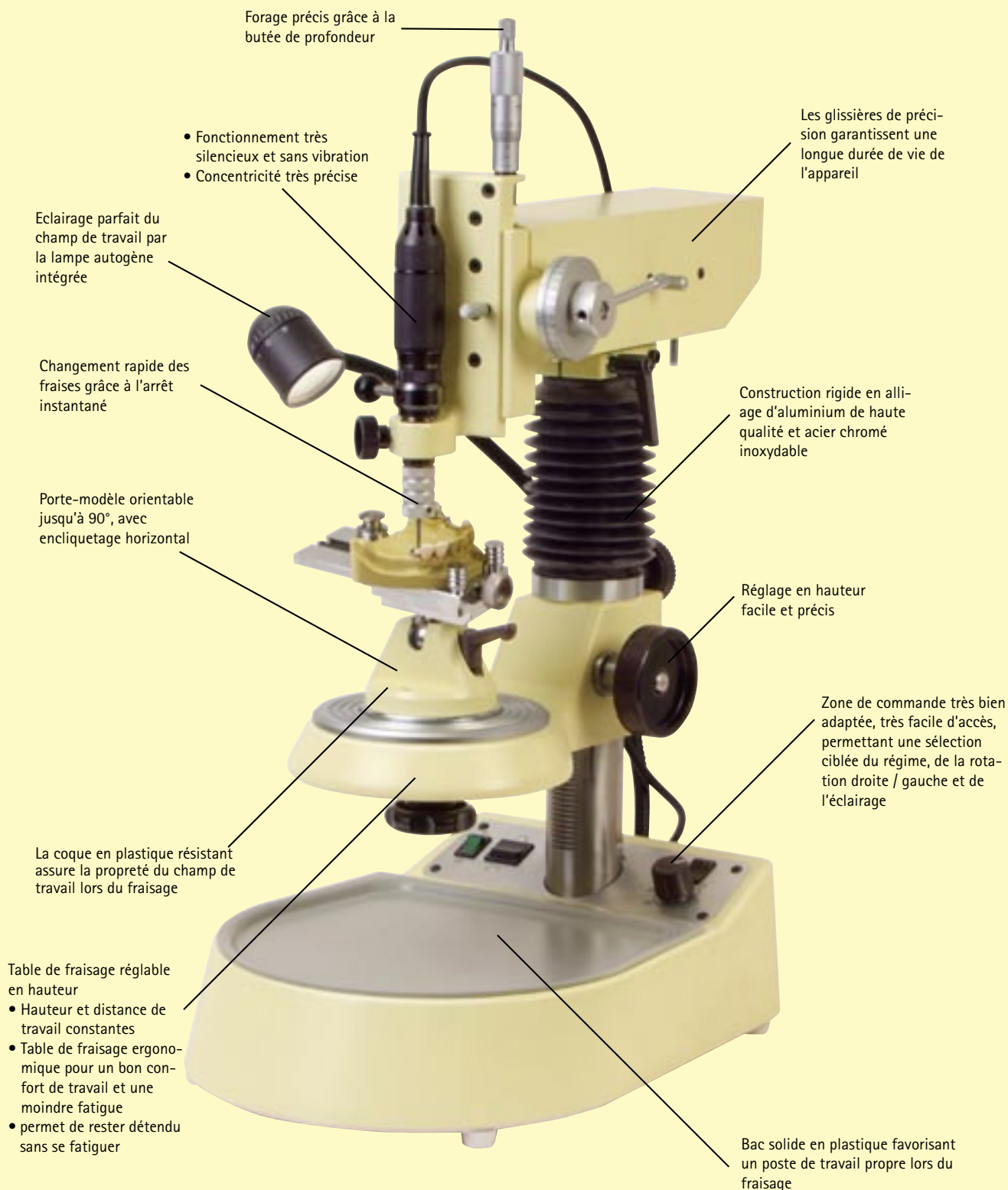


Appareil de fraisage BF 2

Elle exauce tous vos désirs – excellent rapport qualité / prix



1
Fraisage parfait de la cire grâce au réglage progressif de la vitesse de rotation.

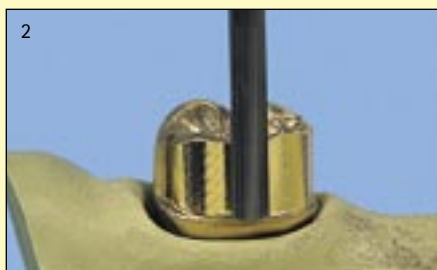

2
Avec la fraise à polir bredent, le métal acquiert un poli remarquable.



3
Grâce à la faible vitesse de rotation, la cire ne devient pas huileuse au cours d'un fraisage interlock ou d'un forage dans la cire.



4
Le couple élevé garantit la précision et la fiabilité du forage, même dans des alliages de coulée sur modèle de grande dureté.

Coffret

4 pièces
1 Fraiseuse BF 2
1 Pièce à main pour BF 2
1 Porte modèle BF 2
1 Boîtier moteur BF 2
REF 140 0098 0



5
Gagnez du temps et de l'argent en dessinant et en mesurant les crochets avec un appareil.



6
Mise en place des attachements, fraisage parallèle ou conique de la cire, le tout avec la BF 2.

Données techniques

Alimentation 230 Volt / 50/60 Hz
Puissance 80 Watt
Vitesse 0 - 30.000 U/min.
Pince de serrage Ø 2,35 mm
Dispositif de sécurité Protection thermique anti-surchage
Couple 2,6 Ncm
Poids 18 kg
Largeur/profondeur/hauteur 250 x 370 x 510 mm

Accessoires

Pince de serrage 2,35 mm REF 730 0016 9
Pince de serrage 3 mm REF 730 0015 3
Molette de taraud REF 330 0115 4
Porte modèle BF 1 REF 730 0017 0
Socle de fraisage REF 140 0089 3
Adaptateur airaqua turbine 16 mm REF 730 0018 4
18 mm (pour BF1) REF 730 0018 3
28,5 mm REF 730 0018 5
Broche de transfert 3 mm REF 360 0116 3
2,5 mm REF 360 0126 5



Porte-modèle BF 1



Socle de fraisage




Adaptateur airaqua turbine



Broche de transfert

Système de mesure
Brenometer

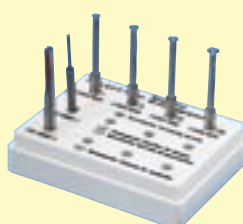

bredent

GmbH & Co.KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tél. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

Sous réserve de modifications