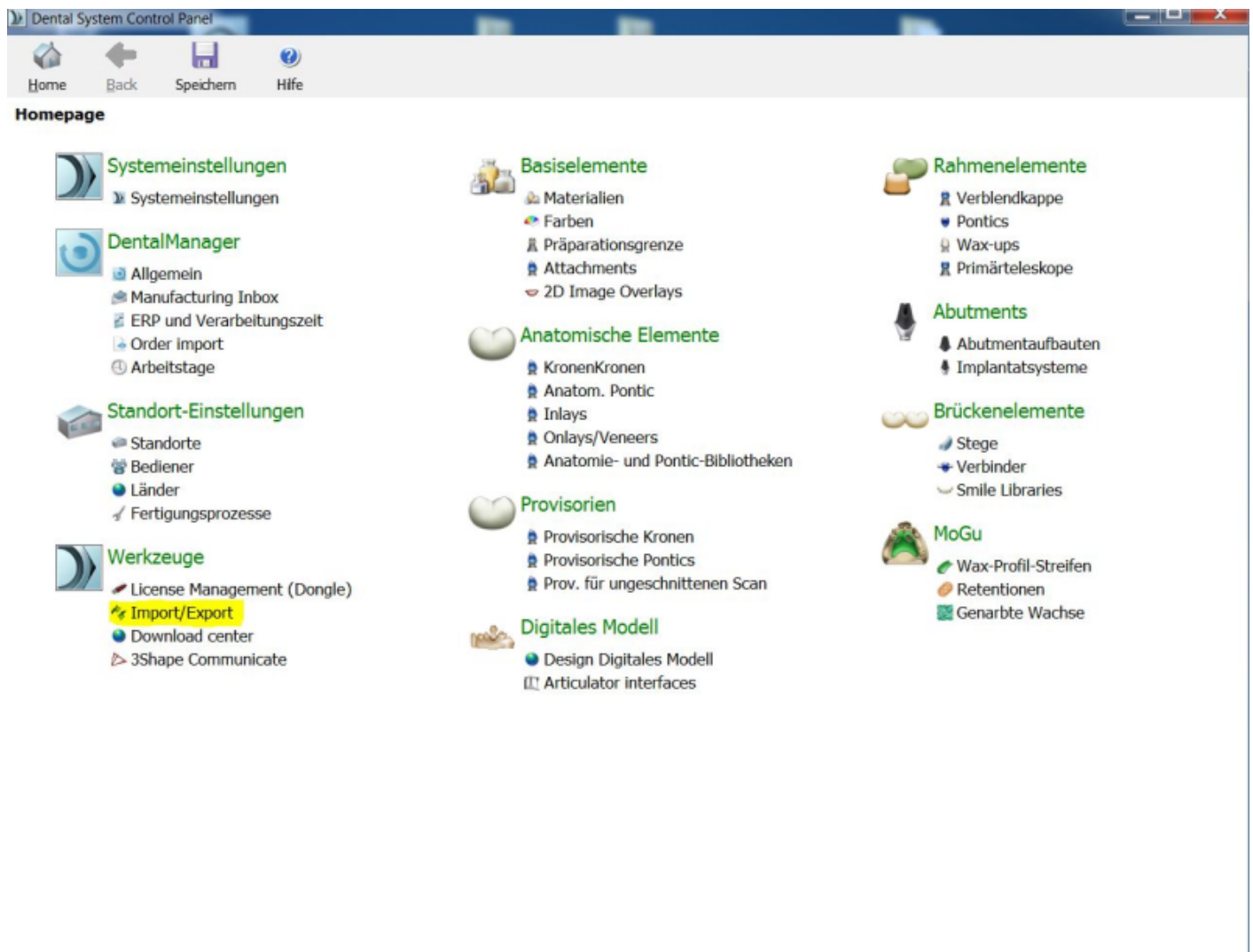




bre dent Attachment-Bibliothek für 3Shape - Installationsanleitung

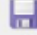
Anhand der Screenshots und der Markierungen werden Sie zu dem Zielverzeichnis geführt, in welches die Attachment Library implementiert werden kann.

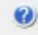


Dental System Control Panel - Materialien exportieren/importieren

Home


Back


Speichern

Hilfe

Werkzeuge > Import/Export

Aufgaben

 Materialien exportieren

 Materialien importieren

Materialien importieren

Um neue Materialien zu importieren, klicken Sie auf "Materialien importieren" und suchen die gewünschte Datei (Dateienerweiterung ".dme"). Danach wählen Sie die gewünschten Materialien aus der angezeigten Liste aus und klicken auf "Importieren". Normalerweise wird empfohlen, alles auszuwählen.
Sie können Materialien auch vom FTP-Server herunterladen: Gehen Sie zur Seite "Standorteinstellungen" -> "Standorte", und klicken Sie "Materialien herunterladen".

Materialien importieren

History Of Import Materials

Materialien exportieren

Dental System Control Panel - Materialien exportieren/importieren

Home Back Speichern Hilfe

Werkzeuge > Import/Export

Aufgaben

- Materialien exportieren
- Materialien importieren

Materialien importieren

Um neue Materialien zu importieren, klicken Sie auf "Materialien importieren" und suchen die gewünschte Datei (Dateiendung ".dme"). Danach wählen Sie die gewünschten Materialien aus der angezeigten Liste aus und klicken auf "Importieren". Normalerweise wird empfohlen, alles auszuwählen.

Sie können Materialien auch vom FTP-Server herunterladen: Gehen Sie zur Seite "Standorteinstellungen" -> "Standorte", und klicken Sie "Materialien herunterladen".

Materialien importieren

Öffnen

Computer

Organisieren

Favoriten

- Desktop
- Downloads
- Zuletzt besucht
- Bibliotheken

Bibliotheken

- Bilder
- Dokumente
- Musik
- Videos

Computer

- Lokaler Datenträger

Festplatten (1)

- Lokaler Datenträger (C:)
548 GB frei von 596 GB

Geräte mit Wechselmedien (2)

- DVD-RW-Laufwerk (D:)
- Wechseldatenträger (E:)
1,43 GB frei von 1,91 GB

Dateiname: Dental System Materialexp

Öffnen Abbrechen

Computer

Organisieren Eigenschaften Systemeigenschaften Programm deinstallieren oder ändern Netzlaufwerk verbinden

Favoriten

- Desktop
- Downloads
- Zuletzt besucht
- Bibliotheken

Bibliotheken

- Bilder
- Dokumente
- Musik
- Videos

Computer

- Lokaler Datenträger
- Wechseldatenträger

Netzwerk

Festplatten (1)

- Lokaler Datenträger (C:)
547 GB frei von 596 GB

Geräte mit Wechselmedien (2)

- DVD-RW-Laufwerk (D:)
- Wechseldatenträger (E:)
1,82 GB frei von 1,91 GB

Lokaler Datenträger (C:) Verwendeter Speicher: Gesamtgröße: 596 GB
Lokaler Datenträger Freier Speicherplatz: 547 GB Dateisystem: NTFS

BitLocker-Status: Aus

