

crea.lign

Composite de revestimiento



Restauración mediante prótesis implantosoportada

© 2016 TD Andreas Lüdke, Bayreuth, Alemania



create natural beauty

Estética del rojo y blanco

powered by
visio.lign

visio.lign

La estética y funcionalidad de este sistema convencen por el grado de libertad único que permite obtener una gran belleza natural, funcionalidad y fisiología. Se trata de un sistema abierto que garantiza la flexibilidad y libertad mediante 6 componentes armonizados: crea.lign, novo.lign, neo.lign, visio.CAM, visio.paint y bond.lign. Cada flujo de trabajo dispone de las herramientas adecuadas y las mejores condiciones para conseguir una solución protésica implantosoportada perfecta. visio.lign es el sistema ideal para conseguir estabilidad y seguridad.

El resultado: restauraciones protésicas de larga vida útil, color consistente y resistencia extrema a la carga.

Aspecto natural y larga vida útil


crea.lign



Tendencia a la tinción ΔE

Medios de tinción:

Infusión en café, té, tabaco y vino tinto

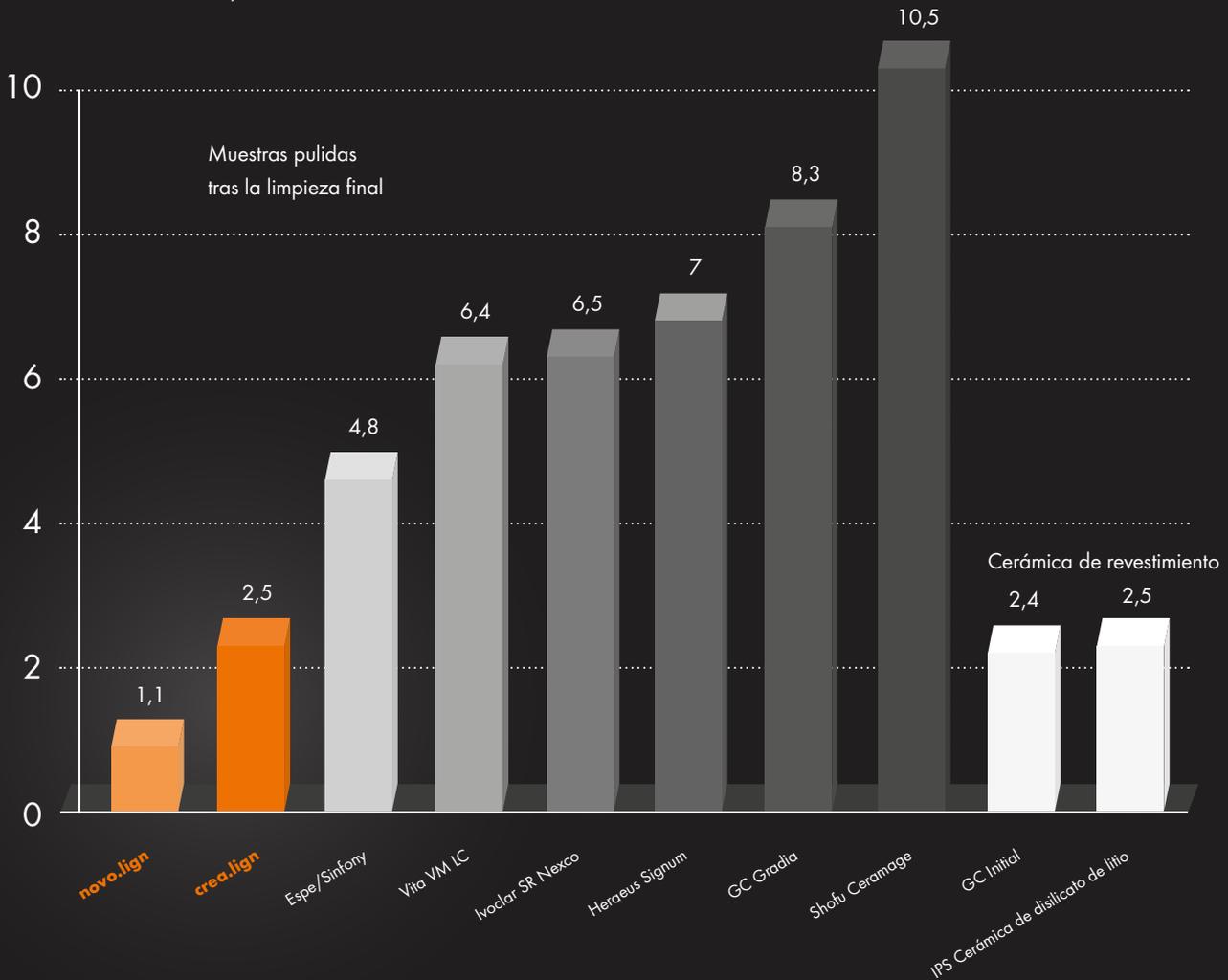

Nueva receta para crea.lign Gel y GUM (light, pink, rosa, red, lila).


Ventajas

- Restauraciones de larga vida útil gracias a su gran resistencia a la rotura.
- Sin fisuras ni desconchamientos gracias a una elasticidad del mismo nivel que la resina para prótesis.
- Excepcional aspecto de dureza en profundidad gracias a la especial forma de transmitir la luz.
- Permite el estratificado directo sobre BioHPP, no requiere opáquer (al usar visio.link)
- Efecto natural sin opalescencia en las masillas de encía GUM.
- Modelado cómodo gracias a una mayor solidez de crea.lign Gel.
- Aplicación cómoda de las pastas gracias a una consistencia mejorada y una adherencia disminuida.

Gráfico "Estudios sobre la tendencia a la tinción":

© 2016 Dr. Rzanny, Universidad de Jena, Alemania

“Flexibilidad en todos los ámbitos”

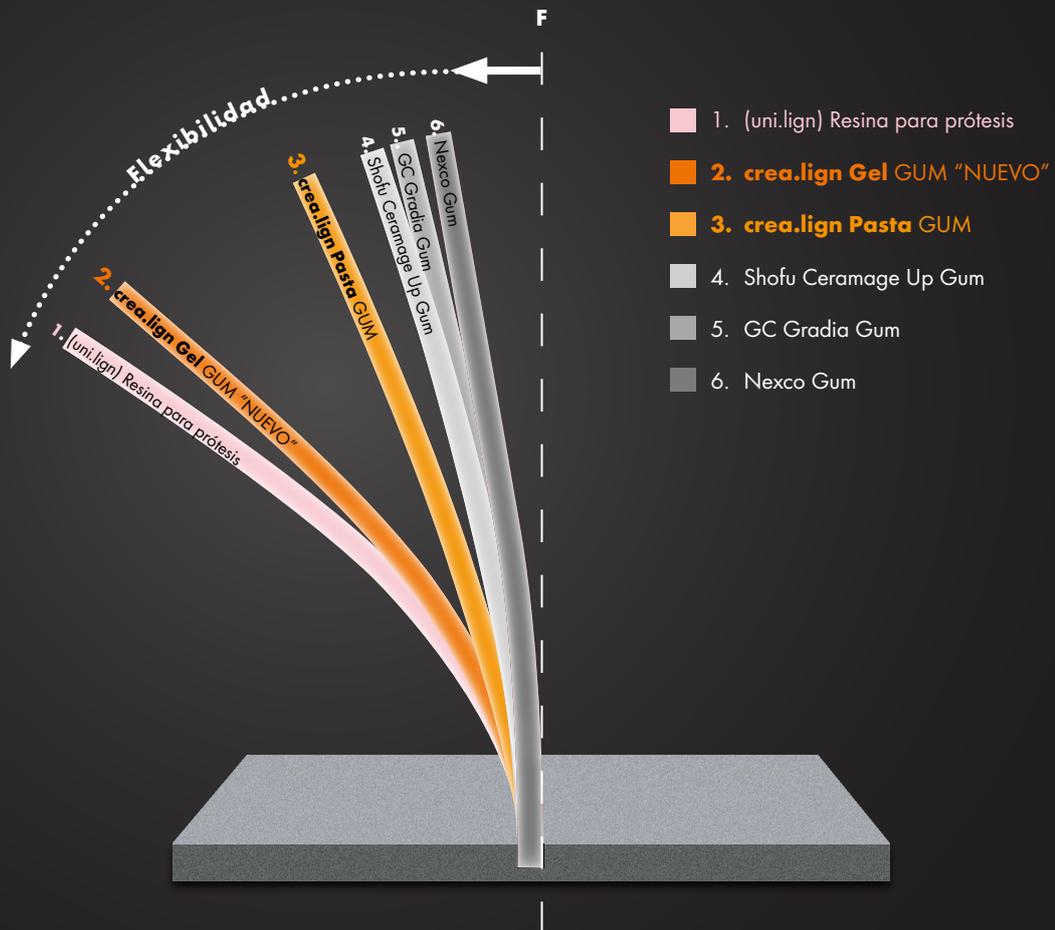

Rojo y blanco con crea.lign.
Rápido, sencillo, duradero, rebasable y ampliable.

La solución para

- sustitutos dentales implantosoportados definitivos fijos o extraíbles
- personalización de prótesis totales con aspecto natural
- todos los materiales de estructuras, incluido el BioHPP y PEEK
- cubrición de toda la superficie, también en restauraciones de arco entero (p. ej. puentes Prettau)

“Libre elección ...



Estratificación con
crea.lign Gel

... del modo de trabajo”



Estratificación con
crea.lign Pasta

crea.lign
Pasta PL light

crea.lign
Pasta PO opak



Se aplica crea.lign Pasta PO (Pasta Opak) en el vestibulo y crea.lign Pasta PL (Pasta Light) en la línea de la encía. A continuación se puntea la superficie.

Se aplica crea.lign red/lila en los puntos y se polimeriza.

Para terminar se sella la superficie con crea.lign Transpa, se alisa y se realiza el polimerizado final.





crea.lign Pasta



“ Me encanta la pasta crea.lign GUM porque permite un modelado excelente y consigue efectos de color absolutamente naturales. El trabajo se realiza con rapidez, resulta ameno y los resultados entusiasman a todos.




TD Andreas Lüdtkke

crea.lign Gel



crea.lign
Gel rosa

crea.lign
Gel light

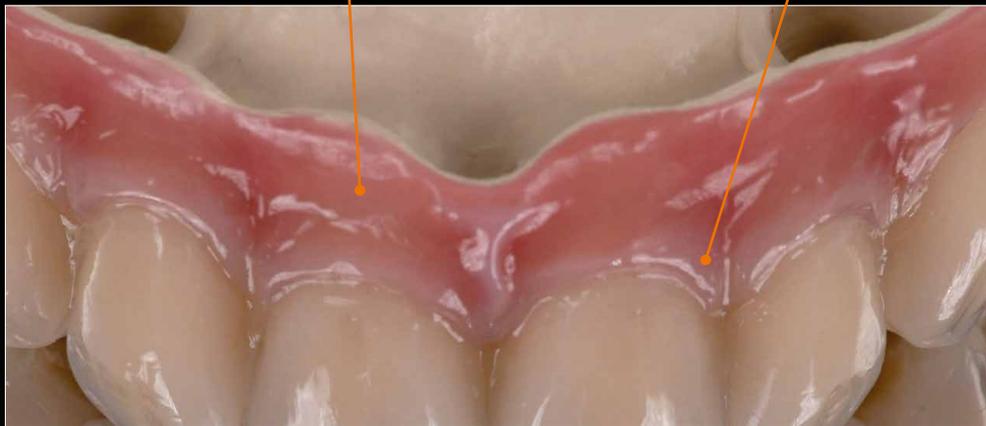

“ El material de revestimiento crea.lign Gel GUM supone un paso adelante para las ventajas que ya ofrecen las estructuras de polímeros de alto rendimiento. La sensación en la boca, el aspecto y la larga vida útil forman una combinación única. ”



TDM Philipp von der Osten

Kit para la estética del rojo y blanco

Personalice sus prótesis y consiga una estética excelente con las ma-sillas crea.lign GUM del sistema visio.lign. Ofrezca a sus clientes este servicio adicional de personalización generando así un valor añadido a su laboratorio. Haga que sus prótesis se conviertan en la tarjeta de visita de su laboratorio.

REF CLIGNSETG



Contenido:

5 x 5 g crea.lign Gel, GUM (light, pink, rosa, red, lila)

2 x 3 g crea.lign Pasta, GUM (PO,PL)

1 x 5 g crea.lign Gel, Modifier beige

1 x crea.lign Gel, Transpa clear

1 x 4 g crea.lign Opaker, GUM

1 x 10 ml crea.lign Modelling Liquid

1 x 10 ml visio.link

1 x pincel Unique Brush, tamaño 4

1 x mango auxiliar con LED UV (crea.lign Gel)

1 x bloque para mezclar

1 x Pin Cover + cánula para aplicar

2 x émbolo giratorio (crea.lign Pasta)


1 x instrucciones para la estratificación

crea.lign Gel o Pasta

Dentin



Gel

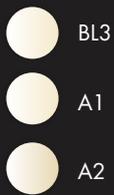

Pasta



crea.lign Gel

GUM



Gel



crea.lign Pasta

GUM



Pasta



crea.lign Gel

Enamel e Incisal



Gel



Modifier



Gel



Transpa Clear



Gel



visio.lign

El sistema estético y funcional

Listado de publicaciones sobre visio.lign



REF 0005770E

crea.lign
Composite de revestimiento
La múltiples posibilidades de aplicación de este revestimiento de excelente calidad en una presentación compacta y clara.



REF 0005900E

bre.Lux
Power Unit 2
El fotopolimerizador mediante LED resulta ideal para el procesamiento de crea.lign. Contiene un resumen de la información fundamental.



REF 0003050E

neo.lign
Dientes completos
La forma y funcionalidad de los dientes completos neo.lign le entusiasmará. Descubra su diversidad y elija la forma que más le guste.




crea.lign - Composite de revestimiento
El composite fotopolimerizable para cerámica convence por su natural opalescencia y una óptima transmisión de la luz que confiere al trabajo una belleza natural.



novo.lign - Carillas de revestimiento
Las carillas de revestimiento novo.lign tienen un cuello más largo y consiguen un efecto de profundidad natural gracias a su morfología estratificada. Son el estándar preferido en la protésica dental.



visio.CAM - Blanks de composite
Las excepcionales propiedades de los materiales del sistema visio.lign son asimismo adecuadas para los trabajos con CAD/CAM. Los blanks de la línea visio.CAM son compatibles con todo el sistema visio.lign.

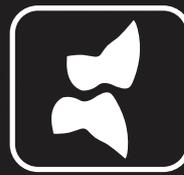

neo.lign - Dientes completos
Los dientes completos neo.lign son del mismo color, forma y material que las carillas de revestimiento novo.lign, lo que los hace ideales para la técnica de combinación.



bond.lign - Imprimación/adhesivo
El sistema de imprimación y adhesivo para conseguir una unión por adhesión química segura y duradera de todos los componentes del sistema. Aplicable a todos los materiales para estructuras convencionales, incluido el BioHPP (PEEK).



visio.paint - Pinturas
Las pinturas visio.paint permiten una rápida y sencilla personalización de los revestimientos.



visio.lign
Carpeta de información
Los principales materiales del sistema visio.lign en una carpeta con información resumida.

REF 0002740E



visio.lign
Presentación del sistema
Compendio de la gama de gran diversidad de los productos del sistema visio.lign.

REF 0095040E



visio.lign
Manual
Instrucciones paso a paso de las diferentes técnicas y opciones de procesamiento del sistema visio.lign.

REF 0002340E

crea.lign

Composite de revestimiento



create natural beauty
Estética del rojo y blanco

bredent
group

0006510E-20210705
Salvo error y modificaciones

