

BioniCut Snap



Férulas funcionales, fresadas y estéticas con la técnica Snap-On

BioniCut Snap



Los odontólogos y los pacientes
están encantados: **Asiento firme,**
no daña los dientes, discreto
y bonito.




Diseñado para aplicaciones estéticas y fisiológicas:

- ▶ Férulas de cicatrización con terapia funcional.
- ▶ Férulas para arco antagonista en restauración inmediata.
- ▶ Prótesis definitivas extraíbles.

Las mejores características de «Snap»

La excelente fuerza restauradora de BioniCut Snap eclipsa por completo a la de otros materiales.

Ni siquiera PEEK o PAEK pueden alcanzar estos valores y esta comodidad, ya que estos materiales son menos elásticos.

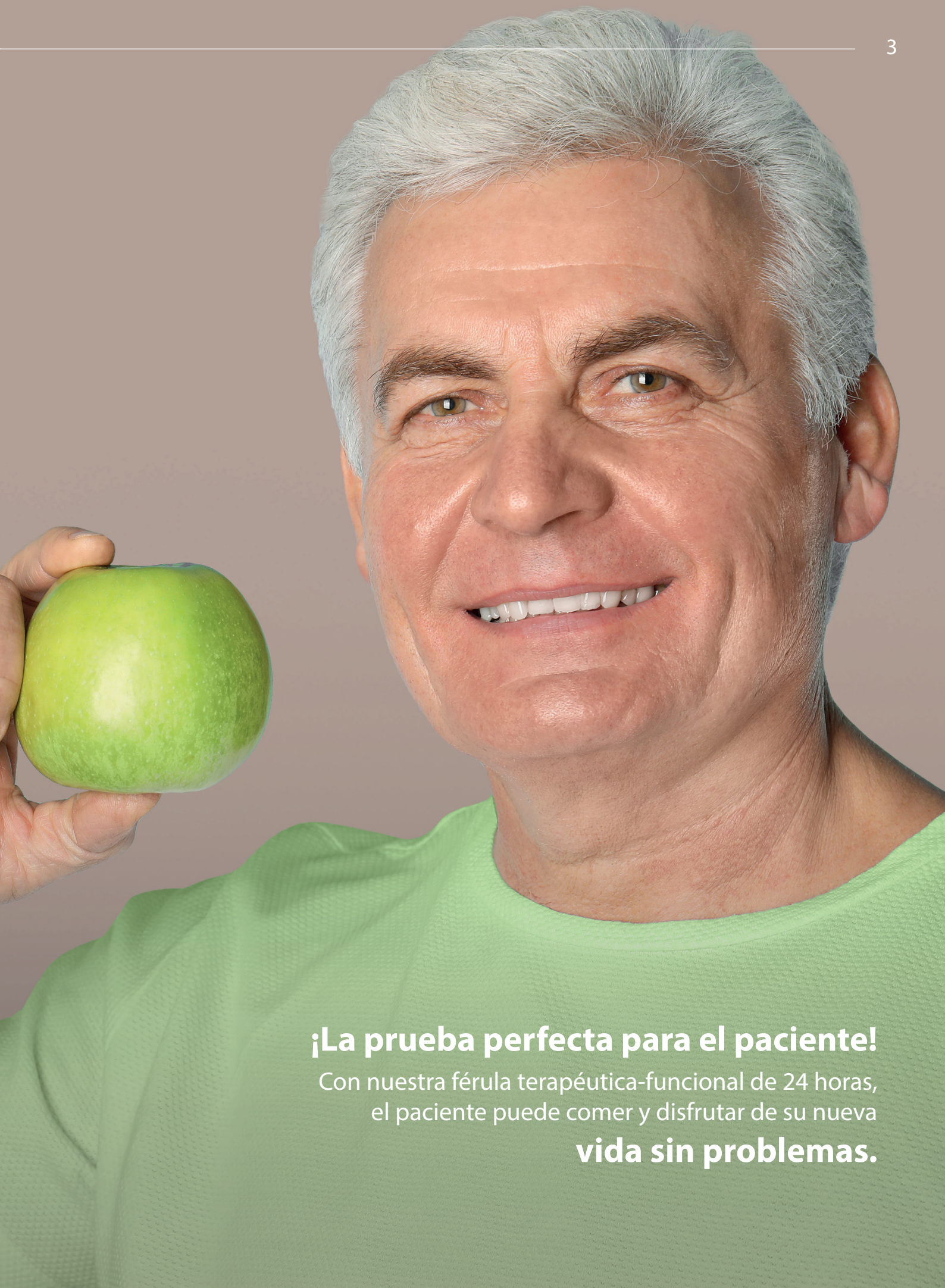

¡La prueba perfecta para el paciente!


Con nuestra férula terapéutica-funcional de 24 horas,
el paciente puede comer y disfrutar de su nueva

vida sin problemas.

BioniCut Snap

Prótesis de grapas

Metal

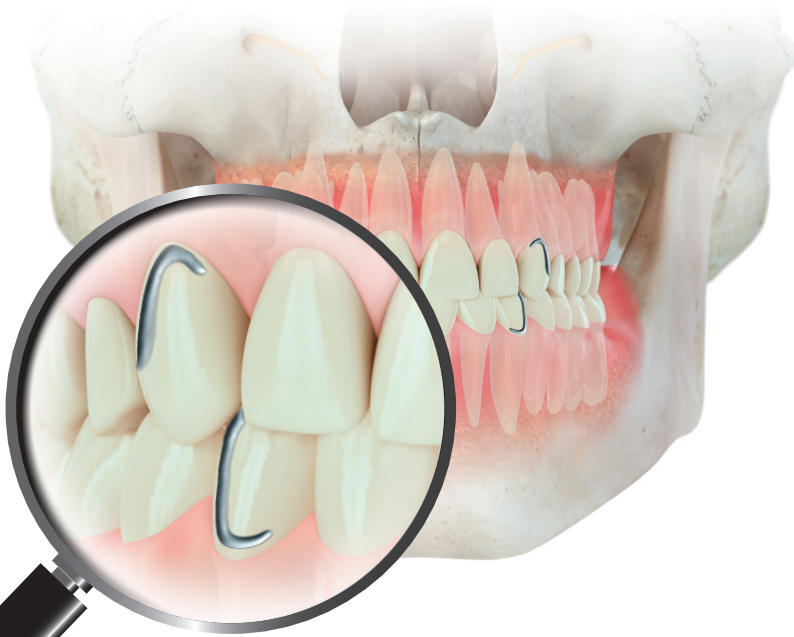

Aspecto molesto y abrasivo,
estresante para el cemento dental

Material biónico



Aspecto más discreto y
no daña los dientes

Férula Snap-On

BioniCut Snap ofrece **un agarre firme y duradero**, incluso al masticar **no hay peligro de rotura.**

No es necesaria una preparación ni la eliminación de cemento dental.

ANTES



DESPUÉS



BioniCut Snap

Se puede mecanizar perfectamente tanto en **seco** como en **húmedo**, apenas requiere repasado con la fresa **breCAM.cutter TP Orange Line***.

* Recomendamos la aplicación en húmedo para evitar el sobrecalentamiento del material.

Nuestro **material** es tan **estable** que se pueden fresar **orificios para una mejor oclusión.**



© Imágenes: Maxi Grüttner

La solución CAD/CAM para:

- ▶ Férulas de color diente, extremadamente finas y prácticamente invisibles (técnica Snap-On/férula Beauty & Bite).
- ▶ Férulas terapéuticas funcionales 24 h con las que el paciente puede comer (!).
- ▶ Prótesis de grapas discretas que preservan los dientes.
- ▶ Bases para esqueléticos telescópicos y con férula.
- ▶ Prótesis de grapas provisionales y extraíbles para la fase de cicatrización del tratamiento con implantes.
- ▶ Sin limitación del tiempo de uso.

BioniCut Snap

Bio Dentaplast



Aproveche los **20 años de experiencia** en tecnología analógica de prensado de polímeros...




El material **Bio Dentaplast**, de eficacia demostrada desde hace décadas, del sistema Thermopress no solo está disponible como pieza bruta para su fresado, sino que también ha **mejorado sus propiedades**.




...▶ BioniCut Snap

... con las **ventajas**
de la moderna
tecnología CAD/CAM.

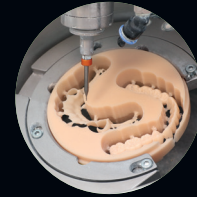

Mediante un proceso de producción desarrollado específicamente para las piezas brutas BioniCut Snap, bredent ha conseguido superar por completo las propiedades mecánicas de los productos fabricados con CAD/CAM por encima del nivel que se obtiene con las técnicas de prensado analógicas, que suele ser excelente.

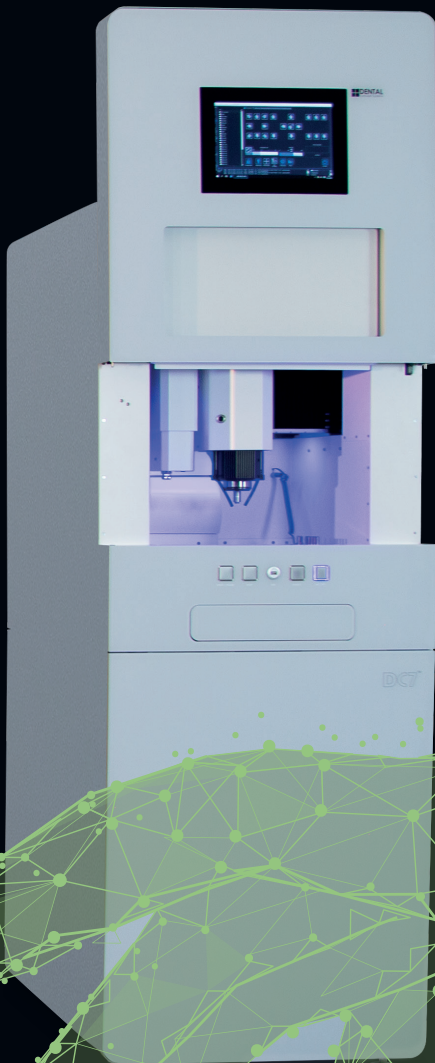

BioniCut Snap

El efecto camaleón

Una estética fascinante



- ▶ Sorprendente efecto camaleón para una adaptación óptica excelente.
- ▶ Equilibrio perfecto entre translucidez y cobertura de color de los dientes naturales.
- ▶ Viveza natural y ausencia de pigmentación gris en la boca.
- ▶ Excelente correspondencia de colores con el sistema de colores clásico A-D.

Estética y funcionalidad:


cómodo de usar gracias a la técnica Snap

Debido a la coincidencia en los materiales, las propiedades son iguales que las de Bio Dentaplast, que fue desarrollado para el sistema Thermopress:

Características conforme a DIN EN ISO 20795-1

Resistencia a la flexión	80 MPa
Módulo E	2200 MPa
Elongación [%]	> 10%

100% de capacidad de recuperación (efecto memoria) a diferencia de lo que ocurre con los materiales PEEK/PEAK.

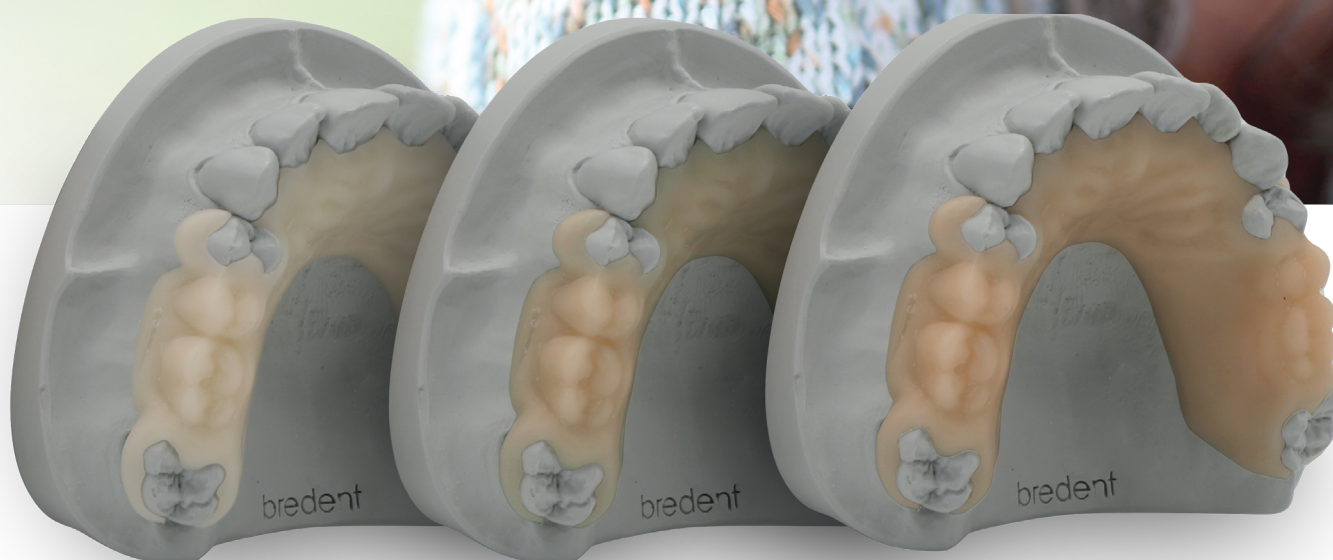

A1

A2

A3



y colores más claros



y colores más intensos

Para otras personalizaciones y adaptaciones del color, recomendamos **visio.lign color**.

SINIAAD Bionicut



Bionicut ^{ACE} Snap en 98,4		
Color	Altura	REF
A1	20 mm (con hombro)	54003680
A1	25 mm (con hombro)	54003685
A2	20 mm (con hombro)	54003700
A2	25 mm (con hombro)	54003705
A3	20 mm (con hombro)	54003690
A3	25 mm (con hombro)	54003695

Bionicut ^{ACE} Snap para diente de circonio		
Color	Altura	REF
A1	20 mm	54003710
A1	25 mm	54003715
A2	20 mm	54003720
A2	25 mm	54003725
A3	20 mm	54003730
A3	25 mm	54003735



La herramienta adecuada para unos resultados rápidos y precisos: la fresa de brendent breCAM Cutter TP o la Orange Line de Dental Concept Systems. Excelentes resultados en el corte en seco o húmedo.

Mistake and subject to change reserved

00910890E-20230202



DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

brendent
group