

BioniCut Snap



Bite funzionali estetici fresati per la tecnica Snap-On

BioniCut Snap



Odontoiatri e pazienti

sono entusiasti: **calza in modo**

stabile, delicato sui denti,

camaleontico ed

esteticamente gradevole.



Ideato per soluzioni estetiche e fisiologiche:

- ▶ Bite funzionale.
- ▶ Bite di protezione per arcate antagoniste nelle riabilitazioni protesiche a carico immediato.
- ▶ Protesi definitive rimovibili Snap-On smile.

Le migliori proprietà della funzione con effetto „snap“

Le caratteristiche meccaniche e la memoria elastica di BioniCut Snap non hanno uguali.

Anche il PEEK o il PAEK non sono in grado di raggiungere questi valori e questo livello di comfort, poiché questi materiali sono meno elastici.




La prova perfetta per il paziente!
Con il nostro bite terapeutico funzionale a 24 ore,
il paziente può mangiare e godersi la vita di
tutti i giorni senza problemi.

BioniCut Snap

Protesi con ganci

Metallo

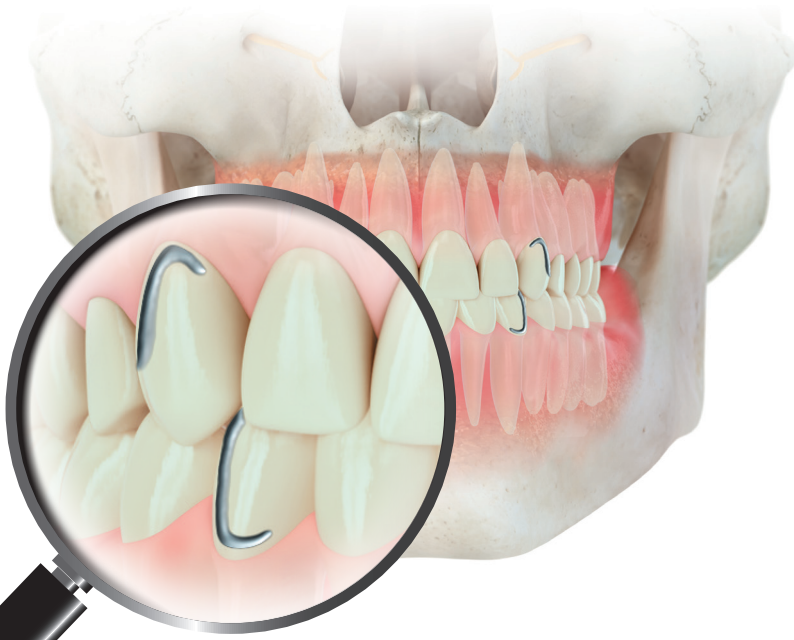

Sono antiestetici e abrasivi,
sui denti naturali

Materiale bionico



Esteticamente più gradevole e
delicato sui denti

Bite Snap-On

BioniCut Snap offre una

tenuta stabile e duratura, persino

durante la masticazione, **senza il rischio di rotture**.

Non è necessaria **alcuna preparazione dei denti naturali**

PRIMA



DOPO



BioniCut Snap

Grazie alle frese **breCAM.cutter TP Orange Line*** si ottengono superfici perfette sia con una lavorazione a **umido** che **a secco**.

* Si consiglia di lavorare a umido per evitare il surriscaldamento del materiale.

Il nostro **materiale** è così **stabile e resistente**, che anche qualora si dovesse realizzare una struttura con **delle cavità si otterrebbe una perfetta occlusione senza rotture.**



© Foto: Maxi Grüttner

La soluzione CAD/CAM per:


- ▶ Bite in colore dentale, estremamente sottili e praticamente invisibili (Tecnica Snap-On / bite Beauty & Bite).
- ▶ Bite terapeutici funzionali a 24 ore, che consentono al paziente di mangiare (!).
- ▶ Protesi con ganci che preservano i denti e sono esteticamente invisibili.
- ▶ Basi per scheletrati con attacchi e con corone telescopiche.
- ▶ Protesi provvisorie rimovibili con ganci per la fase di guarigione in caso di riabilitazioni a supporto implantare.
- ▶ Nessuna limitazione della durata di utilizzo.

BioniCut Snap



Bio Dentaplast

Approfittate dei
**20 anni di
esperienza** nella
tecnica analogica
di pressatura dei polimeri...

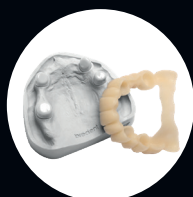

Il materiale „**Bio Dentaplast**“ del sistema Thermopress, già affermato da decenni, non è solo disponibile come blank da fresaggio, ma **le sue proprietà** sono state **ulteriormente migliorate**.




... ► BioniCut Snap

... con i

vantaggi

della moderna
tecnologia CAD/CAM.

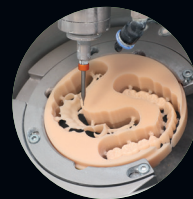

Grazie a un processo produttivo appositamente sviluppato per i blank BioniCut Snap, bredent è riuscita a ottimizzare le proprietà meccaniche dei prodotti CAD/CAM portandole assolutamente al di sopra del livello dei processi analogici di pressatura, che solitamente sono vantaggiosi.



BioniCut Snap

Effetto “camaleontico”

Estetica accattivante



- ▶ Sorprendente effetto „camaleontico” per un eccellente risultato estetico.
- ▶ Perfetto equilibrio tra traslucenza e copertura del colore dei denti naturali.
- ▶ Vitalità naturale e nessun ingrigimento in bocca.
- ▶ Eccellente adattamento cromatico con il sistema colori Vita Classic A-D.


Estetica e funzionalità - massimo comfort grazie alla tecnica Snap-On

Data la somiglianza dei materiali, le proprietà rispetto a quelle del Bio Dentaplast, sviluppato per il sistema Thermopress, sono assolutamente comparabili:

Proprietà in conformità alla norma DIN EN ISO 20795-1

Resistenza alla flessione	80 MPa
Modulo elastico	2200 MPa
Allungamento [%]	> 10%

100% di memoria elastica (effetto memoria)
rispetto ai materiali PEEK / PEAK.

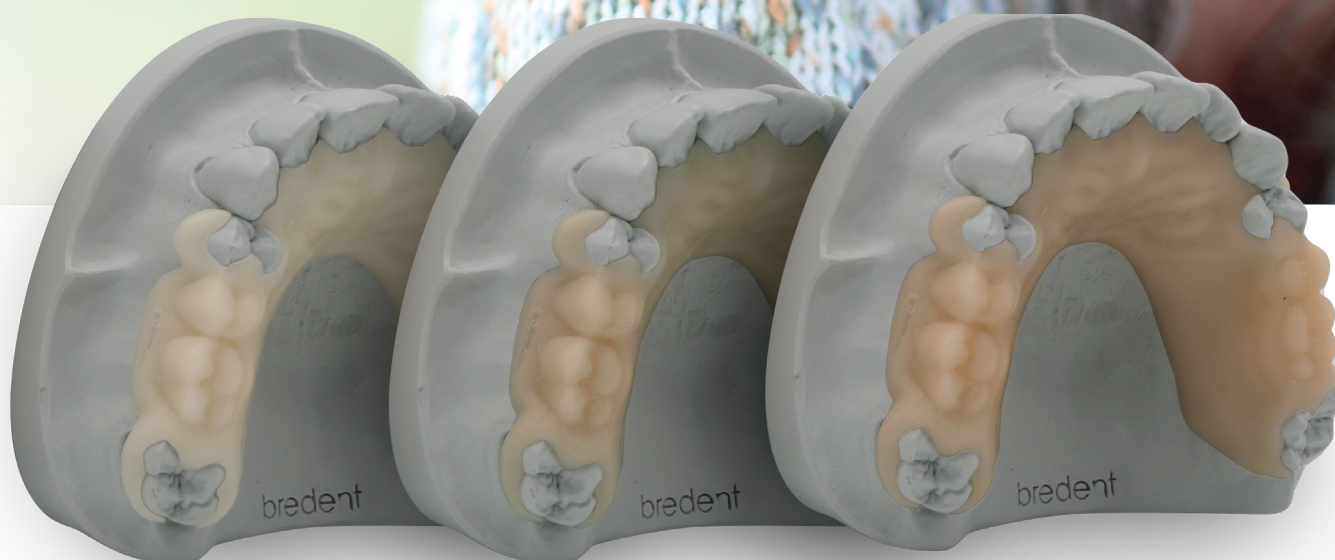

A1

A2

A3



e colori più chiari



e colori più intensi


Per ulteriori colorazioni e caratterizzazioni si consigliano i colori **visio.lign color**.

SINIAAD Bionicut



Bionicut ^{ACE} Snap in 98,4		
Colore	Altezza	REF
A1	20 mm (con spalla)	54003680
A1	25 mm (con spalla)	54003685
A2	20 mm (con spalla)	54003700
A2	25 mm (con spalla)	54003705
A3	20 mm (con spalla)	54003690
A3	25 mm (con spalla)	54003695

Bionicut ^{ACE} Snap per Zirkozahn		
Colore	Altezza	REF
A1	20 mm	54003710
A1	25 mm	54003715
A2	20 mm	54003720
A2	25 mm	54003725
A3	20 mm	54003730
A3	25 mm	54003735

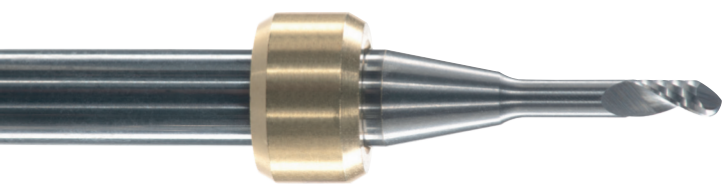

La giusta fresa per risultati rapidi e precisi:
la fresa monolama "breCAM Cutter TP" di
bredent o le frese della linea "Orange Line"
di Dental Concept Systems.

Risultati eccellenti nella lavorazione a secco
o a umido.

Salvo modifiche ed errori

009108901-20230202



DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bredent
group