

# LUXOR Z Multishade

Высочайшая эстетика с комфортом



## Многогранная красота, вдохновленная природой

Настоящая красота исходит изнутри: в том числе, благодаря **Luxor Z Multishade**.

Идеальное сочетание последних поколений диоксида циркония является основой оптимальной прочности, точности прилегания, светопроницаемости и цветовой гармонии.

Захватывающие результаты, вдохновленные красотой природы.

Древние египтяне, одна из первых развитых цивилизаций, уже тогда вдохновлялись природой. Они объединили науку с искусством и природой, создав вечные памятники, которые и сегодня вызывают восхищение.

В **Luxor Z** используются эти тысячелетние знания, которые сочетаются с самыми современными стоматологическими технологиями, что позволяет вывести работы из диоксида циркония на беспрецедентный уровень. Благодаря **Luxor Z** вы узнаете, как секреты истинной красоты становятся реальностью в ваших зубных реставрациях.





Высочайшая эстетика

4 - 5



Идеальная стабильность кромок

6 - 7



Линейный коэффициент усадки

8 - 9



Характеристики изделия

10 - 11




### Высочайшая эстетика Powerchroma для эстетической стоматологии

Технология Multigradient позволяет интегрировать зону Powerchroma на любой высоте заготовки и тем самым создавать еще более контрастный цветовой градиент. В частности, Powerchroma поддерживает изготовление малоинвазивных реставраций, таких как виниры или коронки.

Продуманная конструкция заготовки из диоксида циркония обеспечивает:

- **Естественно реалистичные цветовые градиенты** от дентина Powerchroma до более светлого резцового края
- **Прекрасную транслюценцию**, воспроизводящую естественный цвет зубов
- **Повышенную прочность в местах чрезмерной нагрузки**, без ущерба для эстетики и дизайна

Благодаря Luxor Z вы получите **уникальные градиенты во всех трех категориях - без задержек и ограничений по показаниям.**

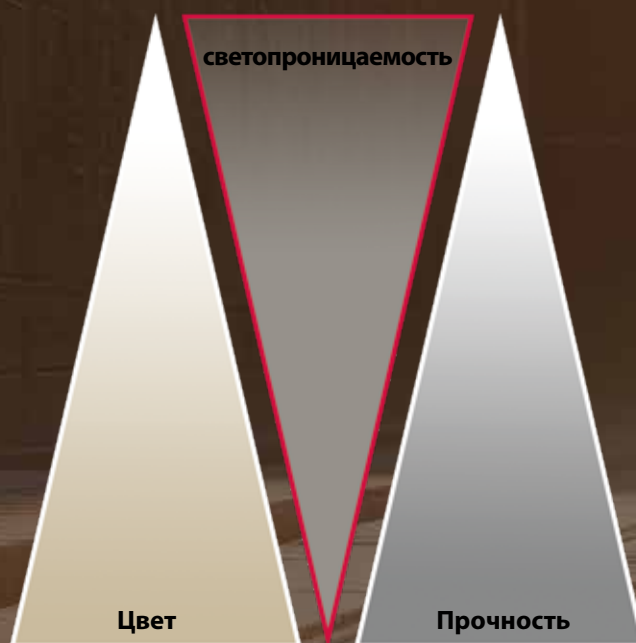


## В центре внимания - материалы

### Спектр естественной красоты

Сравнение синтезированной коронки и цветной пластины наглядно демонстрирует эстетические и функциональные свойства **Luxor Z Multishade**. Коронка демонстрирует естественный цветовой градиент с более высокой светопрозрачностью в резцовой области для естественной светопередачи, в то время как дентин обеспечивает оптимальную непрозрачность с помощью натуральной формулы Powerchroma и обеспечивает максимальную безопасность с оптимизированными показателями прочности.

Изображение подчеркивает способность **Luxor Z Multishade** сочетать эстетические требования с техническими характеристиками.

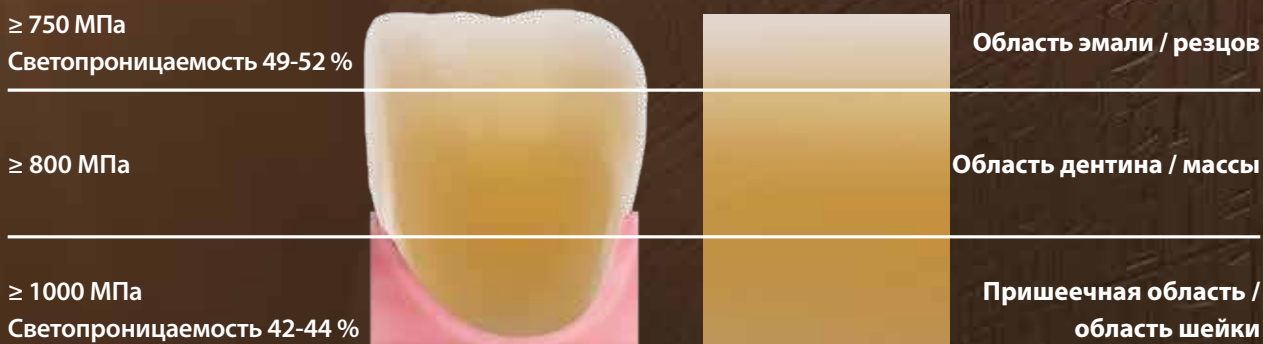



### Максимальная стабильность кромок Оптимальные результаты фрезерования

**Luxor Z Multishade** прессуется изостатическим методом, поэтому устойчив к микротрещинам и сколам. Это означает, что реставрации сохраняют свою индивидуальную поверхность, форму и красоту даже при высоких скоростях подачи и фрезерования.

Обеспечьте высокую надежность процесса и низкий коэффициент использования материалов в производстве с помощью **Luxor Z Multishade**.

#### Изостатическое прессование

- золотой стандарт для заготовок из диоксида циркония

Усовершенствованная формула специализированного порошка 4Y и 5Y, а также изостатическое прессование являются основой плавного перехода.

Продуманное наслаивание порошка в заготовке **Luxor Z Multishade** обеспечивает равномерную естественную эстетику и контролируруемую усадку, что гарантирует не только оптимальную точность прилегания, но и исключительную стабильность ваших зубных конструкций. Все это возможно благодаря нашему высококачественному производственному процессу. Доверьтесь превосходному качеству **Luxor Z Multishade**, чтобы получить результаты, которые будут столь же надежными, сколь и точными, благодаря их естественной эстетике.



“  
”  
Возможность выбора программы спекания с Luxor Z Multishade, значительно улучшил мой рабочий процесс. Обычное спекание обеспечивает реставрации исключительной глубиной и чёткостью, а быстрое спекание повышает эффективность. Это позволяет мне полностью удовлетворять различные потребности моих клиентов.



**Фер Грифон, MDT**  
Мадрид, Испания

“  
”  
Я впечатлен стабильностью кромок Luxor Z Multishade. Я всегда добиваюсь неизменно высокого качества и точности реставраций. Цвет материала превосходный. Как зубной техник я всегда стремлюсь к совершенству. Благодарю.



**Лука Мелик, MDT**  
Любляна, Словения

“  
”  
*La estética que se consigue con Luxor Z Multishade es excelente. Las transiciones de color son increíblemente naturales y confieren a cada restauración una notable belleza.*



**Филипп Писселу, MDT**  
Суван, Франция

“  
”  
Luxor Z Multishade действительно произвел на меня впечатление своей исключительной прозрачностью и установил новый стандарт в стоматологическом протезировании. Способность материала естественно пропускать свет позволяет создавать реставрации с высоким уровнем эстетики. Эта эстетика не только повышает визуальную красоту реставраций, но и помогает пациентам более естественно и более гармонично улыбаться.



**Сандер Поланко, ZTM**  
Статен-Айленд, США

“  
”  
Как стоматолог и зубной техник со стажем, я всегда искал высококачественные материалы, обеспечивающие эстетически оптимальные результаты. Зона Powerchroma особенно полезна для минимально инвазивных реставраций, таких как виниры или коронки. Luxor Z Multishade сумел расширить границы эстетики и функциональности, предлагая реставрации, которые как технически, так и эстетически отвечают самым высоким требованиям. Я в восторге от возможностей Luxor Z Multishade и с нетерпением жду возможности продолжать создавать неподвластную времени красоту в своей работе.



**Доктор Винченцо Муселла,**  
Модена, Италия



# Luxor Z

## Multishade

### Динамическая синтеризация

#### Устойчивая эффективность и естественная красота

В основе каждой реставрации из оксида циркония лежит момент трансформации — синтеризация (спекание).

При этом энергия печи раскрывает истинные возможности материала. **Luxor Z Multishade** подходит для быстрой и стандартной синтеризации. Эти два проверенных протокола синтеризации были тщательно разработаны для удовлетворения самых высоких требований зубных техников.

Стандартное время синтеризации идеально подходит для реставраций, где необходимо использовать весь спектр эстетики и естественной прозрачности (область передних зубов), в то время как скоростной вариант идеален, когда решающую роль играют время и экономичность.

Оба способа синтеризации приводят к результатам, которые выдержат испытание временем, — обещание, в основу которого поставлены ваши потребности.





## В центре внимания: эффективность

### Сравнение скоростной и стандартной синтеризации

Узнайте, как выбранная программа синтеризации влияет на светопрозрачность **Luxor Z Multishade**. Вы можете добиться выдающихся результатов как при скоростной, так и при стандартной синтеризации. Визуальное сравнение дает четкое представление о возможностях **Luxor Z Multishade** для реализации реставраций с различными эстетическими и временными требованиями.

В то время как поверхности, синтезированные с высокой скоростью, демонстрируют впечатляющую эффективность в производстве, поверхности, синтезированные стандартным способом, отличаются исключительной глубиной и четкостью, имитирующими естественную эстетику зубов. Узнайте, как программа синтеризации влияет на светопрозрачность вашей работы.

Выбор за вами. Используйте продуманный дизайн заготовки **Luxor Z** в соответствии с вашими требованиями.

### Время синтеризации

	скоростная	стандартная
До 3 единиц	2,2 ч.	11,5 ч.
До 6 единиц	3,8 ч.	11,5 ч.
До 14 единиц	---	11,5 ч.



# LUXOR Z


## Multishade

# LUXOR Z


## Multishade

**Luxor Z Multishade** — это не просто циркониевая заготовка. Вы выбираете стильную, привлекательную эстетику, оптимизированную благодаря многоградиентному процессу производства и использованию самых современных технологий. Оцените безупречное сочетание мастерства и инноваций, вдохновленное историей Египта. **Luxor Z Multishade** сочетает в себе стоматологический опыт и прогресс, создавая вместе с вами вечную красоту.

### Доступные цвета

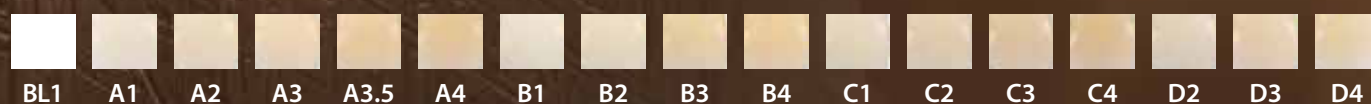

### Доступная высота

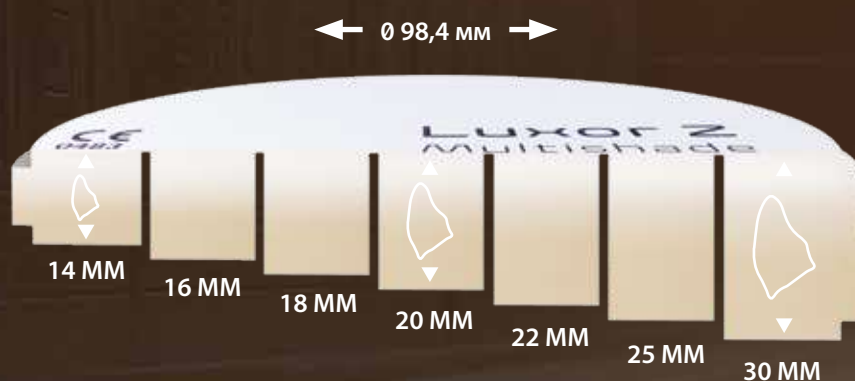



## Технические характеристики

Класс материала	4Y-TZP I 5Y-TZP
DIN EN ISO 6872:2019-01	Класс 5
Светопроницаемость	Резцовый*: 49 - 52 % I Пришеечный*: 42 - 44 %
Прочность на изгиб	Резцовый: $\geq 700$ МПа I Пришеечный: $\geq 1000$ МПа

\* в зависимости от цвета зубов

## Показания

	Luxor Z Multishade	Luxor Z Frame
Полностью анатомическая коронка	✓✓	✓
Виниры, вкладки и накладки	✓✓	✓
Полностью анатомический мост (макс. 2 сегмента)	✓✓	✓
Применение окклюзионного полноконтурного протезирования (All-on-4)	✓✓	✓
Абатменты на клеевой основе	✓	✓✓
Мостовидные конструкции (макс. до 2 понтиков)	✓	✓✓
Телескопическая конструкция / облицованный колпачок	✓	✓✓

✓ подходит    ✓✓ подходит лучше всего





Просто оформите заказ по электронной почте или телефону:  
**CSCInternational@bredent.com** или **+49 (0) 7309 / 872 - 440**

Онлайн-поддержка CAD/CAM:  
**dental-concept-systems.com/support**



 **DENTAL**  
Concept Systems

Dental Concept Systems GmbH  
Gieselwerder Str. 2  
34399 Wesertal - Германия

Телефон: + 49 (0) 5572 – 3021010  
Факс: + 49 (0) 5572 – 3021099  
www.dental-concept-systems.com

a company of  
**bredent** group